

HANDLEIDING voor de TFT-test


De TFT-test is een ontlastingsonderzoek op darmparasieten. De test bestaat uit drie containers: twee containers met vloeistof (SAF) DAG 1 en 3 en één container zonder vloeistof voor DAG 2. SAF is een fixatiemiddel dat nodig is om de vegetatieve stadia te kunnen aantonen. Darmparasieten worden onregelmatig uitgescheiden daarom is het belangrijk om op drie achtereenvolgende dagen de ontlasting af te nemen. Na de productie DAG 1 en DAG 3 moet de feces direct in de containers gedaan worden, sommige stadia zijn na een half uur buiten het lichaam al niet meer detecteerbaar.

Instructies

U kunt de instructie voor de TFT test ook bekijken via de volgende youtube link (QR code):



1. **DAG 1:** neem **container 1 met vloeistof** uit de blister en vul de buis met feces
LET OP: de feces en vloeistof mogen niet boven de rode streep uitkomen.
Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de containers rustig (ca. 20s).
Noteer op de container uw naam, geboortedatum en afname datum.

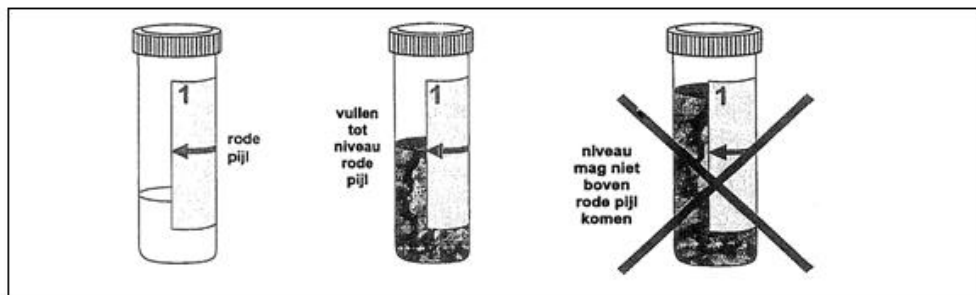

2. **DAG 2:** neem de **container 2 zonder vloeistof** uit de blister en vul deze voor de helft met feces. Noteer op de container uw naam, geboortedatum en afname datum.
3. **DAG 3:** neem **container 3 met vloeistof** uit de blister en vul de buis met feces
LET OP: de feces en vloeistof mogen niet boven de rode streep uitkomen.
Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de containers rustig (ca. 20s).
Noteer op de container uw naam, geboortedatum en afname datum.
4. **VERZENDEN NAAR LAB:** Stop op dag 3 alle afgenomen buizen in de blister en stop de blister in de meegeleverde sealbag. Stuur de sealbag met blister samen met het laboratoriumaanvraagformulier in de verzendenvelop op

Opmerkingen

- Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, dient u toch slechts **eenmaal per dag een container** te vullen. Indien u niet dagelijks produceert, wacht u totdat u alle drie de containers heeft kunnen vullen. De langere tijd tussen de monsterafnames is niet van invloed op het onderzoek.
- Met name bij zgn. doorspoeltoiletten valt de ontlasting vaak direct in het water. Dit maakt het **verzamen** lastig en kan de opbrengst van het parasitologisch onderzoek verminderen. Door vóór de ontlastingsproductie enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het wateroppervlak te leggen, wordt dit min of meer afgedekt. De ontlasting kan dan vanaf het papier verzameld worden.
- **Bewaren:** De containers kunnen bij kamertemperatuur bewaard worden.
- De gebruikte **SAF-vloeistof heeft een geringe toxiciteit** voor volwassenen. Huidcontact is, indien dit direct met water wordt afgespoeld, niet schadelijk. De waarschuwing dient met name om te voorkomen dat kinderen de vloeistof drinken.


ANLEITUNG zum TFT-test

TFT-test im Stuhl zur Untersuchung auf Darmparasiten. Das Testset besteht aus drei Stuhltransportgefäßen, zwei Transportgefäße mit Flüssigkeit und ein Transportgefäß ohne Flüssigkeit.

Test-Abnahme

Während drei aufeinander folgenden Tagen, den Stuhl jeweils in einem, der drei Transportgefäße sammeln.

- Tag 1: in einem Transportgefäß mit Flüssigkeit
- Tag 2: in einem Transportgefäß ohne Flüssigkeit
- Tag 3: in einem Transportgefäß mit Flüssigkeit

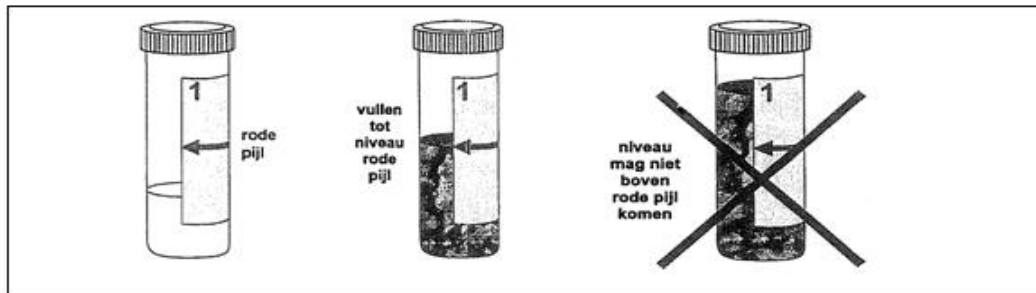

Wichtig:

- In das Transportgefäß ohne Flüssigkeit, bitte drei große Löffel Stuhl einfüllen.
- Die Transportgefäße mit Flüssigkeit, soweit mit Stuhl füllen, bis die Flüssigkeit die rote Markierung erreicht (siehe Abbildung)
- Nach dem Befüllen der Transportgefäße, diese mit den braunen Schraubverschlüssen gut schließen und langsam ca. 20 Sekunden schütteln.
- Notieren Sie bitte auf jedem Transportgefäß ihren Namen, ihr Geburtsdatum und den Tag der Befüllung.
- Nach dem Befüllen des dritten Transportgefäßes sollten Sie das gesamte Untersuchungspaket so bald wie möglich an unser Labor, mit dem beigegefügt Umschlag, einsenden. Wir empfehlen die Einsendung von Sonntag bis Mittwoch.

Sie können den TFT Test auch unter folgendem Youtube Link finden (QR code):



Wichtige info und viel gestellte fragen

- Patienten mit sichtbarem Blut im Stuhl, sollten direkt an einem Tag, ein mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß und das Gefäß ohne Flüssigkeit befüllen. Beide Gefäße sollten sowohl mit Stuhl, als auch Blut und Schleim gefüllt werden, da auch Parasiten im Blut oder dem Schleim anwesend sein können. Beide Behälter müssen dann sofort an unser Labor geschickt werden.
- Wenn der dritte Tag der Untersuchungsreihe auf einen Sonntag fällt, können Sie die Transportgefäße am Montag versenden. Haben Sie mehrere Male pro Tag Stuhlgang, befüllen Sie nur 1 mal pro Tag ein Transportgefäß.
- Wenn Sie nicht täglich Stuhlgang haben, warten Sie bitte mit der Einsendung, bis Sie alle drei Behälter befüllt haben.
- Bei Tiefspültoiletten benutzen Sie Bitte auf jeden Fall das beigegefügte Stuhlauffangpapier. Dieses kann nach der Stuhlentnahme ohne Probleme mit abgespült werden, da es sich auflöst und die Toilette nicht verstopft.
- Die Transportgefäße können bei Raumtemperatur gelagert werden* Die verwendete Flüssigkeit (SAF) in den Transportgefäßen ist eine Fixierungsflüssigkeit mit geringer Toxizität für Erwachsene. Eine Berührung mit der Haut ist, wenn Sie direkt mit Wasser abgewaschen wird, nicht schädlich.
- Die Transportgefäße müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Die Flüssigkeit darf in keinem Fall getrunken werden.

Für weitere Informationen und/oder Fragen zur Durchführung des Tests stehen wir ihnen gerne hilfreich zur Seite. Telefon 02237-657630 oder email info@rpsanitashumanus.com

Postadresse: RP Analytic, Postfach 1171, 50140 Kerpen, Deutschland