

# INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN EN VERZENDKLAARMAKEN VAN DE TESTKIT TFT


Analytic



Lees eerst de instructies helemaal door voordat u aan de afname van het monster begint!  
Bij vragen: neem eerst contact op met uw behandelaar!

## De testkit bestaat uit:

- Handleiding voor monsterafname
- 3x Fecesbuis groot. DAG 1 en DAG 3 bevatten (SAF) vloeistof, voor fixatie van parasieten
- Eén blister bestemd voor drie fecesbuizen
- 3x Ontlastingopvanger
- RigidSafetyBag®

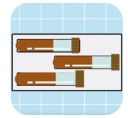

Daarnaast heeft u een retourenvelop en aanvraagformulier van RP Analytic ontvangen. Is uw pakket niet compleet? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)113-370170 (ma-vr 8:30-17:00 uur).

## Vorbereiding:

1. Vul uw naam en geboortedatum in op de etiketten op de fecesbuizen.
2. Controleer of uw gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
3. Controleer of er vloeistof in buis 1 en 3 zit. Is dit niet het geval? Neem dan eerst contact met ons op via het bovenstaand telefoonnummer.
4. Bekijk de instructiefilm via de volgende YouTube link:



TFT

<https://www.youtube.com/watch?v=wMJL2WukNm8>

Of kijk op onze website: [www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/instructiefilms](http://www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/instructiefilms)

## Belangrijk!

- Deze test moet op **drie achtereenvolgende dagen** worden afgenomen. Darmparasieten worden onregelmatig uitgescheiden, daarom is het belangrijk om op drie verschillende dagen ontlasting af te nemen.
- De **fixatievloeistof** (buis 1 en 3) is nodig om de zogeheten 'vegetatieve stadia' van de darmparasieten te kunnen aantonen. Na de stoelgang op DAG 1 en DAG 3 moet de ontlasting direct in de fecesbuizen worden gedaan, omdat sommige stadia van de darmparasieten na 30 minuten buiten het lichaam niet meer detecteerbaar zijn.
- Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, dient u toch slechts **éénmaal per dag een container te vullen**. Indien u geen dagelijkse stoelgang heeft, wacht u totdat u alle drie de containers heeft kunnen vullen. De langere tijd tussen de monsterafnames is niet van invloed op het onderzoek.
- Mocht u geen ontlastingopvanger hebben, dan valt de ontlasting bij zgn. doorspoeltoiletten vaak direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de betrouwbaarheid van het parasitologisch onderzoek verminderen. Door vóór de stoelgang enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het wateroppervlak te leggen, wordt dit min of meer afgedekt. De ontlasting kan dan vanaf het papier worden verzameld.






- De gebruikte **fixatievloeistof (SAF)** heeft een **geringe toxiciteit** voor volwassenen. Huidcontact is, indien dit direct met water wordt afgespoeld, niet schadelijk. Deze waarschuwing dient met name om te voorkomen dat kinderen de vloeistof drinken.
- Moet u naast de TFT nog andere ontlastingsmonsters (feces, histamine en/of microbioom) afnemen? Start dan met de TFT en neem op DAG 3 van deze testkit ook de andere testkits af.




### Afname van het monster DAG 1

1. Bevestig de ontlastingsopvangner op de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem **buis 1 met vloeistof** uit de blister en vul de buis met ontlasting.  
**Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.**
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

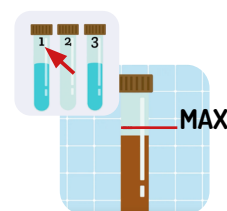

### Afname van het monster DAG 2



1. Bevestig de ontlastingsopvangner op de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem **buis 2 zonder vloeistof** uit de blister en vul de buis voor de helft met ontlasting.  
**NB: Neem van tenminste 6 verschillende plaatsen een scheepje ontlasting!**
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis.
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

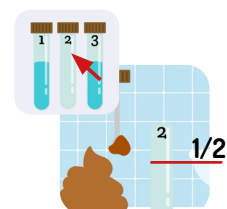




### Afname van het monster DAG 3

1. Bevestig de ontlastingopvangner op de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem **buis 3 met vloeistof** uit de blister en vul de buis met ontlasting.  
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
3. Noteer de afnamedatum op de buis.

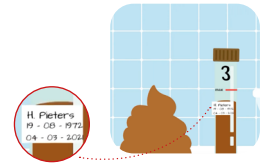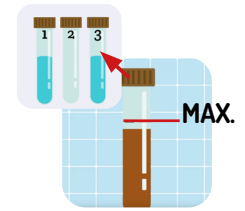

### Overige handelingen DAG 3

4. Noteer de afnamedatum van alle drie de afnamedagen op het aanvraagformulier.
5. Doe de derde buis in de blister en stop de blister in de RigidSafetyBag®.
6. Verwijder de witte folie van de RigidSafetyBag®. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.
7. Doe de RigidSafetyBag® samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht. De verzendenvelop is nu gereed voor verzending naar ons laboratorium.

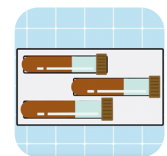

### Verzenden:

- Binnen Nederland moet de verzending op **maandag t/m donderdag** (bij postbuslichting of PostNL-punt) plaatsvinden.
- Vanuit België versturen vanaf maandag t/m woensdag via UPS.

NB: Verstuur niet in het weekeinde of voor feestdagen!



### Versturen naar:

NL: RP Analytic • Antwoordnummer 1461 • 4460 VS Kamperland

België: RP Analytic • Afgeven bij een UPS-accesspoint